

服薬支援 ROBO



日本製

型番：MOR-3（朝・昼・夜タイプ）
MOR-4（朝・昼・夜・寝タイプ）



朝 昼 夜 寝

決められた時間にお薬が自動で出てお知らせします。

お求めやすい
低価格を実現！

時間になったら
ケースが出て
きます。



MOR-4（朝・昼・夜・寝タイプ）
44,800円（税抜）



MOR-3（朝・昼・夜タイプ）
39,800円（税抜）

『コックンお薬よ〜』の特長

お薬の **飲み過ぎ** **飲み忘れ** **飲み間違い** を防止します！

- ◆ シンプル機能で価格は従来品の半値以下
- ◆ 「飲み過ぎ防止」の新機構採用（特許申請中）
- ◆ 朝・昼・夜・寝の4パターン任意設定が可能
- ◆ 薬の量に応じて1週間～4週間分の収納パターンが可能
- ◆ 乾電池で2年以上稼働 コードレスで移動可能

『コックンお薬よ〜』ここがポイント！

服薬支援ROBO『コックンお薬よ〜』は、お薬の「飲み過ぎ」「飲み忘れ」「飲み間違い」を防止します。シンプルな機能でお求めやすい価格を実現したことにより導入が容易になり、お薬を飲まれている方、ご家族、ケアマネジャー、看護師など、幅広い方々の服薬管理を支援します。

特長1 決められた時間にお薬が自動で出てお知らせ

朝・昼・夜・寝 ごとに設定された時間になると、お薬ケースが自動で出てきてお知らせします。出てきたお薬ケースを取り出さなかった場合は、3時間（夜は4時間）経つと自動的に収納され、過剰服用を予防します。

**特長2** 朝・昼・夜・寝 の4パターン任意設定が可能

モード切替スイッチで、朝・昼・夜・寝 の4パターンを任意に入切の設定ができます。例えば、日中お家にいない方などは、昼を切っておくことができ、朝・夜・寝ごとに薬ケースが出てきます。

**特長3** 「飲み過ぎ」や「いたずら」防止する新機構

決められた時間以外はお薬ケースを手で引き出すことができないキーレス機構で「飲み過ぎ」を予防します。（特許申請中）万が一、お薬ケースを取り出した場合は、上部から取り出すことができます。さらに4様式は鍵付き前カバーが付属され完全に「飲み過ぎ」や「いたずら」防止することができます。

【施錠】

上部トレーにあるピンを押すだけ。



【解錠】

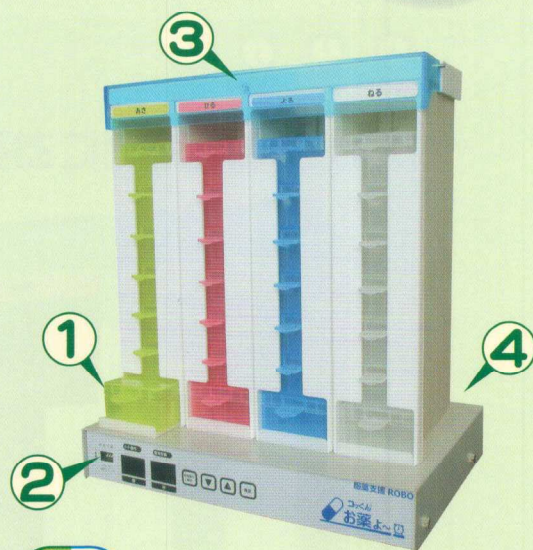
専用キーを穴に押し込むだけ。専用キー以外は解錠できません。

**特長4** 乾電池で2年以上稼働 コードレスで移動が可能

電源は乾電池（単一3本）で2年以上稼働します。コードレスなので、移動が可能で設置場所を選びません。またコードによる転倒の心配ありません。



コードによる
転倒の心配なし！

**特長5** お薬の量に応じて1週間～4週間分のお薬ケースの収納パターンが可能

お薬の量によって、お薬ケース仕切板（別売り）で収納パターンを変更できるので、お薬の仕分けの時間を軽減できます。

● 1週間分
（仕切板なし）

● 2週間分
（仕切板 1枚使用）

● 4週間分
（仕切板 3枚使用）



お薬ケースは、
朝・昼・夜・寝
ごとに色分けして
あります。

使い方

電池を入れて時刻を合わせるだけ！

1 乾電池を入れる（単一3本）**2 時刻を合わせる**

- 「時刻表示 / 設定」ボタン（図①）を長押しします。時が点滅します。
- 「▼」「▲」ボタン（図②）を押して時を設定します。
- 「確定」ボタン（図③）を押します。分が点滅します。
- 「▼」「▲」ボタン（図②）を押して分を設定します。
- 「確定」ボタン（図③）を押して設定完了です。

3 必要に応じて朝・昼・夜・寝のパターンを設定する

モード切替スイッチで設定します。特長2をご参照ください。

4 お薬をケースに入れて完了

仕様

品名	服薬支援ROBO“コックンお薬よ〜”	
型番	MOR-3	MOR-4
仕様	朝・昼・夜タイプ（3様式）	朝・昼・夜・寝タイプ（4様式）
電源	単一アルカリ乾電池×3本 電池持ち時間：2年以上	単一アルカリ乾電池×3本 電池持ち時間：2年以上
サイズ	幅300×奥行205×高さ338（mm）	幅300×奥行205×高さ338（mm）
重量	約3.5kg	約4kg
材質	本体：ABS、スチール ケース：PP	本体：ABS、スチール ケース：PP
価格	39,800円（税抜）	44,800円（税抜）

お薬を出す時間は、出荷時に設定されています。お客様ご自身で生活に合わせて変更もできます。

【出荷時設定時間】朝：6時 昼：11時 夜：4時 寝：8時15分

※ケースはお薬を取り出すまで、設定時間から3時間（夜は4時間）出ています。

日本ヘルツ株式会社

日本ヘルツ

検索

<http://www.j-herz.com>

本社 〒168-0074 東京都杉並区上高井戸1-8-17 プライムコアビル 本館5F

TEL：03-5316-1308 FAX：03-5316-1338

営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島3-12-15 第5新大阪ビル606号

TEL：06-6305-5185 FAX：06-6886-7110